

# Dino-Eye AM7025X

kan du forvandle dit konventionelle mikroskop til et digitalt mikroskop.

- ▶ 5 Megapixel løsning
- ▶ Passer til 23, 30, 30.5 mm okularer
- ▶ Avanceret software
- ▶ Fortrinlig billedkvalitet og ægte farvegengivelse
- ▶ Passer til C-Mount-adapter






**Dino-Lite**  
Digital Microscope  
The Industry Standard

# Dino-Eye AM7025X

DinoEye Edge SMP okularkameraet giver en fortrinlig billedkvalitet og ægte farvegengivelse. Det gør DinoEye velegnet til krævende brugssituationer, hvor ægte farvegengivelse er af største vigtighed, som eksempelvis ved patologiprøver og kvalitetskontroller.

Det store synsfelt gør det muligt at få flere detaljer med i ét billede. Man kan erstatte et af okularne på dit mikroskop med DinoEye-kameraet, som måler 23 mm i diameter, eller man kan bruge en af de medfølgende adapterer på 30 eller 30,5 mm for at få det til at passe

Desuden kan man bruge C-mount-gevindet, som følger med 30,5 mm-adapteren, til at forbinde DinoEye okularet til C-mount-adapteren (som ikke medfølger) på mikroskopets trinokularrør. AM7025X DinoEye okularkameraet passer til næsten alle mikroskopmærker og -modeller på markedet. AM7025X leveres med DinoCapture software til Windows og DinoXscope software til MAC, som indholder måle-, annotations-, video-, time lapse-funktioner m.m.

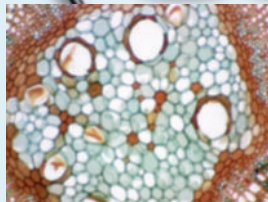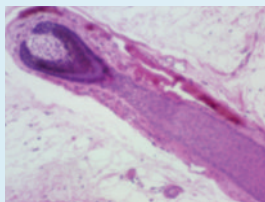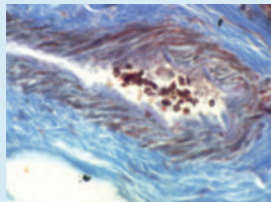

**Dino-Lite**  
Digital Microscope  
**The Industry Standard**

