

Dino-Eye AM7025X

הפוך את המיקרוסקופ הקונבנציונלי
לדיגיטלי

- ◀ רזולוציה של 5 מגהפיקסל
- ◀ מתאים לעינייות 25, 30, 30.5 מ"מ
- ◀ תוכנה מתקדמת
- ◀ איכות תמונה גבוהה ביותר ועיבוד צבע אמת
- ◀ חיבור למתאם C סטנדרטי



Dino-Eye AM7025X




תסרגב סג נימז 1.3MP (AM4025X)

עינית מצלמת DinoEye Edge 5MP מספקת תמונות באיכות מעולה ובצבע אמיתי. מה שהופך את מצלמת DinoEye לפתרון מושלם כאשר נדרשת תמונה בצבעים אמיתיים כגון באבחון גורמי מחלה או בקרת איכות.

שדה הראייה הרחב מאפשר לצפות ביותר פרטים בתמונה אחת. ניתן להחליף את עינית המיקרוסקופ במצלמת Dino-Eye בעלת קוטר של 23 מ"מ, או שניתן להשתמש במתאמים המסופקים של 30 או 30.5 מ"מ להתאמה.

לחילופין, ניתן לחבר באמצעות מתאם C סטנדרטי המגיע עם מתאם ה-30.5 מ"מ לחיבור על גבי חצובה משולשת

של המיקרוסקופ. עינית המצלמה AM7025X תתאים לפיכך לכל סוגי המיקרוסקופים ולכל הדגמים הקיימים. AM7025X מגיעה עם תכנת DinoCapture ל- Windows וכן DinoXcope למערכת MAC, הכוללת מדידות, הוספת טקסט, וידאו ופונקציות צילום מואץ.

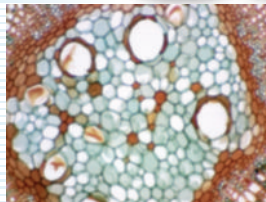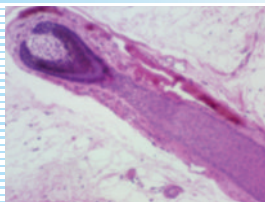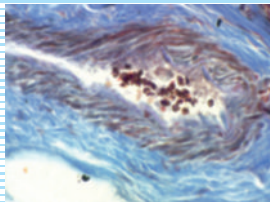

Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard



IDCP

IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu